

## Cleaning Tinkerine Face Shield Lite

### Step 1. Precautions for cleaning

- Before you begin, protect yourself by wearing gloves, a face mask, and another face shield if possible.
- Clean and disinfect the working surface thoroughly.
- Only clean one face shield at a time to avoid cross-contamination.

### Step 2. Disassembling the face shield


- Disassemble the face shield in the reverse order of the assembly:
  - Remove the knit elastic band
  - Remove the clips
  - Remove the forehead strap
- Due to the porosity of the knit elastic band and the 3D printed clips, we cannot guarantee that these parts are fully sanitizable after being used. We recommend that they are replaced regularly at the user's discretion. They should be replaced immediately if damaged or upon direct contact with anyone with flu-like symptoms.

### Step 3. Cleaning the PETG visor and the forehead strap

- It is recommended to fully submerge the PETG visor and the forehead strap in a disinfectant solution to ensure complete sanitization before and after every use.
- After removing the visor and the strap from the solution, allow a few minutes for the parts to dry. Wipe down any remaining disinfectant droplets with a clean paper towel.
- If submerging is impossible, thoroughly spraying the visor and the strap with a disinfectant can also be effective. Allow a few minutes to dry. Wipe down any remaining droplets.
- Our recommended disinfectants are:
  - Isopropyl alcohol (70%)
  - Hydrogen peroxide (28%)
- To find out more about specific cleaning products, please refer to the [list of disinfectants approved by Health Canada](#).

### Step 4. Reassembling the face shield

To reassemble to face shield, use the disinfected PETG visor and forehead strap with a set of new replacement parts. Refer to the assembly manual.

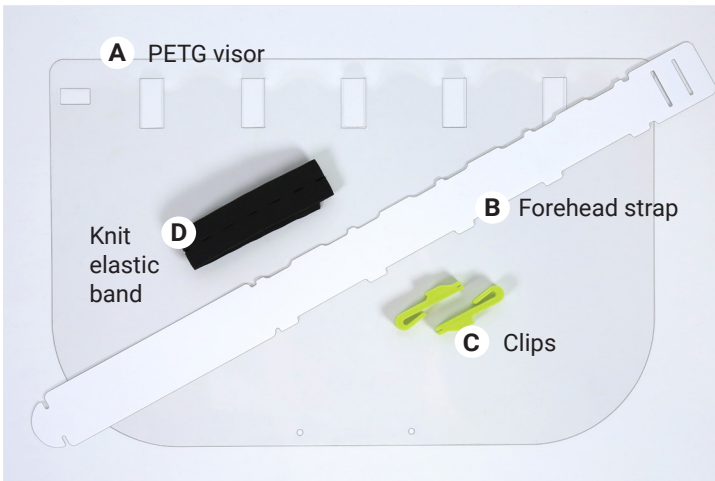

Tinkerine Face Shield Lite is not sterile. Since the conditions and methods of assembly and use of Tinkerine Face Shield Lite are beyond the manufacturer's control, the manufacturer expressly disclaim any and all liability arising from any assembly and use of Tinkerine Face Shield Lite. NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING TINKERINE FACE SHIELD LITE. The user should thoroughly test any application before use. By assembling and using Tinkerine Face Shield Lite, the user does so at their own risk and waives all claims against the manufacturer. The user releases the manufacturer from all liability, whether due to foreseeable or unforeseeable risks, relating to Tinkerine Face Shield Lite. The user is solely responsible for their assembly and use of the Tinkerine Face Shield Lite. The manufacturer is not responsible for errors or omissions relating to Tinkerine Face Shield Lite. The manufacturer does not provide any medical advice.

## Nettoyage de l'écran facial Tinkerine Lite

### Étape 1. Précautions pour le nettoyage

- Avant de commencer, protégez-vous en portant des gants, un masque facial et un autre écran facial si possible.
- Nettoyez et désinfectez soigneusement la surface de travail.
- Nettoyez un seul écran facial à la fois pour éviter la contamination croisée.

### Étape 2. Démontage de l'écran facial


- Démontez le masque facial dans l'ordre inverse de l'assemblage:
  - i. Retirez la bande élastique en tricot
  - ii. Retirez les broches
  - iii. Retirez la sangle frontale
- En raison de la porosité du coussin en mousse, de la bande élastique en tricot et des broches imprimés en 3D, nous ne pouvons pas garantir que ces pièces sont entièrement désinfectables après leur utilisation. Nous recommandons de les remplacer régulièrement à la discrétion de l'utilisateur. Elles doivent être remplacées immédiatement si elles sont endommagées ou lors d'un contact direct avec toute personne présentant des symptômes ressemblant à ceux de la grippe.

### Étape 3. Nettoyage de la visière PETG et de la sangle frontale

- Il est recommandé de plonger complètement la visière PETG et la sangle frontale dans une solution désinfectante pour assurer une désinfection complète avant et après chaque utilisation.
- Après avoir retiré la visière et la sangle de la solution, attendez quelques minutes que les pièces sèchent. Essuyez les gouttelettes de désinfectant restantes avec une serviette en papier propre.
- Si l'immersion est impossible, une pulvérisation complète de la visière et de la sangle avec un désinfectant peut également être efficace. Laissez sécher quelques minutes. Essuyez toutes les gouttelettes restantes.
- Nos désinfectants recommandés sont:
  - Alcool isopropylique (70%)
  - Peroxyde d'hydrogène (28%)
- Pour en savoir plus sur les produits de nettoyage spécifiques, veuillez consulter la [liste des désinfectants approuvés par Santé Canada](#).

### Étape 4. Remontage de l'écran facial

Pour remonter sur l'écran facial, utilisez la visière PETG désinfectée et la sangle frontale avec un ensemble de nouvelles pièces de rechange. Reportez-vous au manuel de montage.

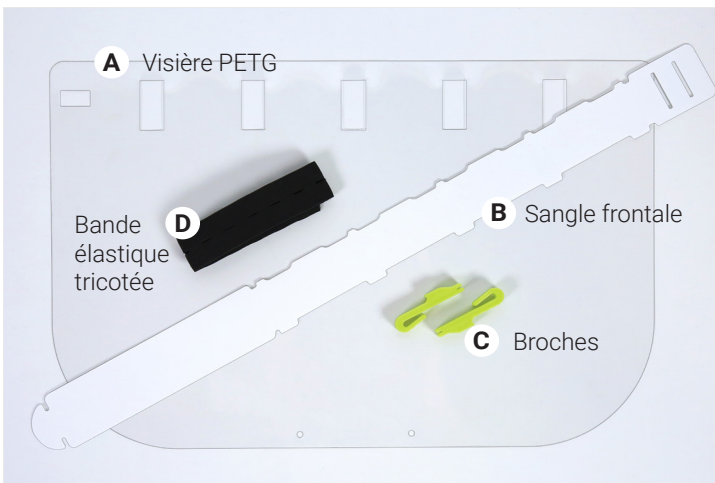

L'écran facial Tinkerine Lite n'est pas stérile. Comme les conditions, méthodes de montage et utilisations de l'écran facial Tinkerine Lite sont hors de contrôle du fabricant, le fabricant rejette expressément toute les responsabilités résultantes du montage et de l'utilisation de l'écran facial Tinkerine Lite. AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE UTILISABLE À TOUTE FIN PARTICULIÈRE, AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE NI AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE CONCERNANT L'ÉCRAN FACIAL TINKERINE LITE. L'utilisateur devrait tester minutieusement toute fonction avant utilisation. L'utilisateur assemble et utilise l'écran facial Tinkerine Lite à ses propres risques et renonce à toute demande de réparation à l'encontre du fabricant. L'utilisateur libère le fabricant de toutes responsabilités, qu'elles soient dues à des risques prévisibles ou non, en relation avec l'écran facial Tinkerine Lite. L'utilisateur est seul responsable de son montage et utilisation de l'écran facial Tinkerine Lite. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs ou omissions concernant l'écran facial Tinkerine Lite. Le fabricant ne fournit aucun conseil médical.