
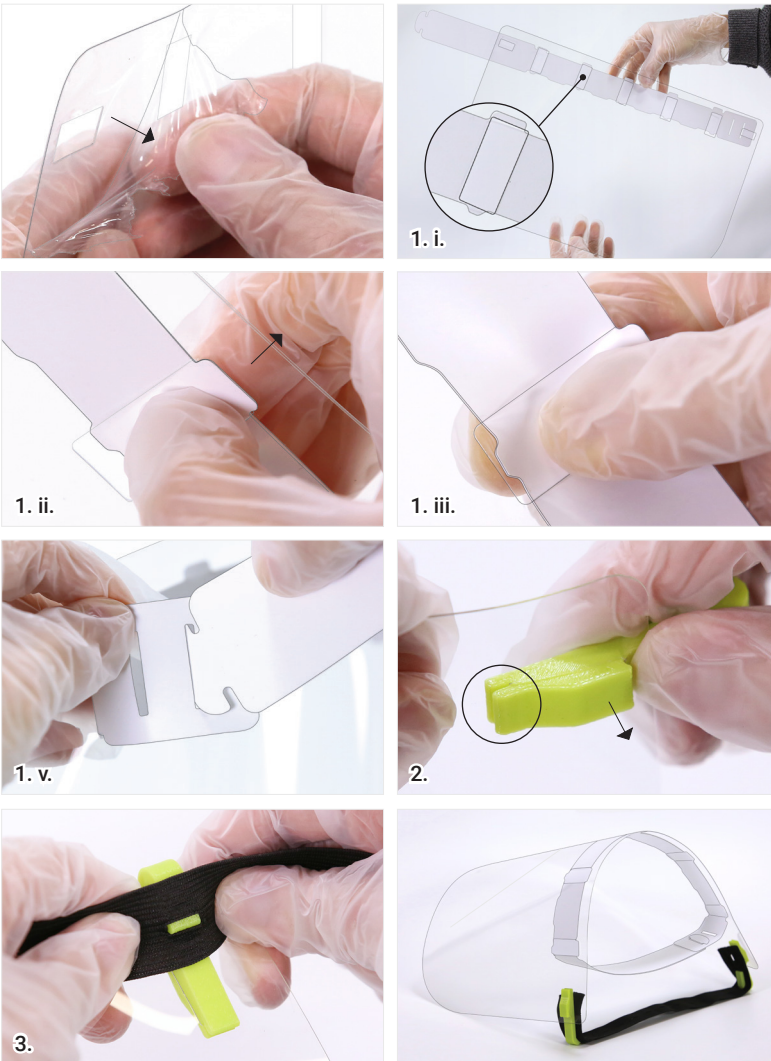


Tinkerine Face Shield Lite: Manual

Tinkerine Face Shield Lite is a **Class I medical device** used to protect the facial area from splashes, sprays, or spatters of bodily fluids. The visor and forehead strap can be sanitized and reused for continued protection.

⚠ BEFORE ASSEMBLY

Make sure the protective films on both sides of the PETG visor are peeled off.

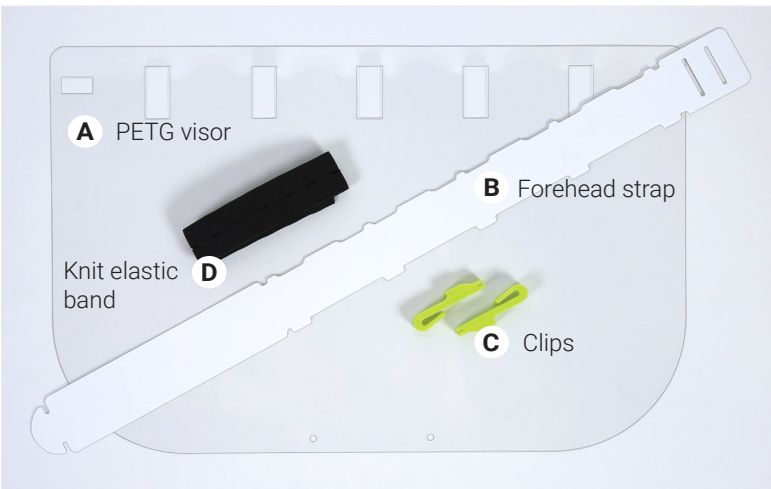

Step 1. Attaching the forehead strap to the visor

- i. Hold the forehead strap underneath the visor in the orientation shown in the picture. Align the strap's five rectangular tabs to the five cutouts on the visor.
- ii. Starting from the centre of the five cutouts, slide the rectangular tab into the cutout.
- iii. Place your thumb over the cutout and your index finger under the trapezoid tab. In a pinching motion, bend the strap until the trapezoid tab snaps into place.
- iv. Repeat for the other four cutouts.
- v. Connect the two ends of the strap to form a loop. Make sure the ends are on the inside of the loop. Hook through the outer slot for a looser fit and the inner slot for a tighter fit.

Step 2. Attaching the clips

- i. From the inside of the visor, slide a clip into the visor's top right corner hole until the tip of the clip grabs onto the visor.
- ii. Pop the clip's centre tab into the visor.
- iii. Repeat the above steps for the left corner hole.

Step 3. Attaching the knit elastic band

- i. Attach the knit elastic band onto the hooks on both sides. It's easier to hold the band perpendicular to the clip as shown in the picture.
- ii. Adjust the band for a snug but comfortable fit.

Reusing the face shield

The visor and the strap can be safely sanitized with isopropyl alcohol (70%) or hydrogen peroxide (28%) before and after every use. Replace the other parts regularly at your own discretion. Replace them immediately if damaged or upon direct contact with anyone with flu-like symptoms. For detailed instructions, please visit tinkerine.com/shield-cleaning-instructions.

WARNING: Tinkerine Face Shield Lite is not rated for impact resistance and fire protection. It helps protect against certain fluid spatters. Misuse may result in sickness or death.



Tinkerine Face Shield Lite is not sterile. Since the conditions and methods of assembly and use of Tinkerine Face Shield Lite are beyond the manufacturer's control, the manufacturer expressly disclaim any and all liability arising from any assembly and use of Tinkerine Face Shield Lite. NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING TINKERINE FACE SHIELD LITE. The user should thoroughly test any application before use. By assembling and using Tinkerine Face Shield Lite, the user does so at their own risk and waives all claims against the manufacturer. The user releases the manufacturer from all liability, whether due to foreseeable or unforeseeable risks, relating to Tinkerine Face Shield Lite. The user is solely responsible for their assembly and use of the Tinkerine Face Shield Lite. The manufacturer is not responsible for errors or omissions relating to Tinkerine Face Shield Lite. The manufacturer does not provide any medical advice.

Écran Facial Tinkerine Lite: Manuel

L'écran Facial Tinkerine Lite est un dispositif médical de Classe I utilisé pour protéger la zone du visage contre les éclaboussures, les pulvérisations et les éclaboussures de fluides corporels. La visière et la sangle frontale peuvent être désinfectées et réutilisées pour une protection continue.

⚠ AVANT DE COMMENCER

Assurez-vous que les films de protection de la visière PETG sont décollés des deux côtés

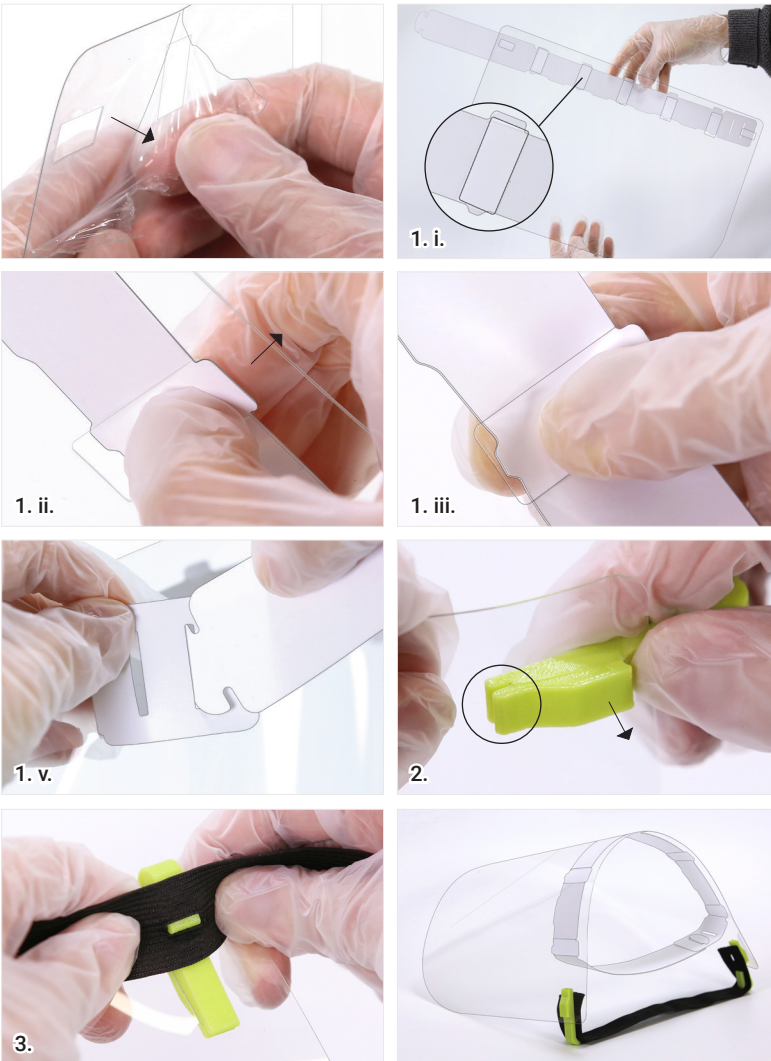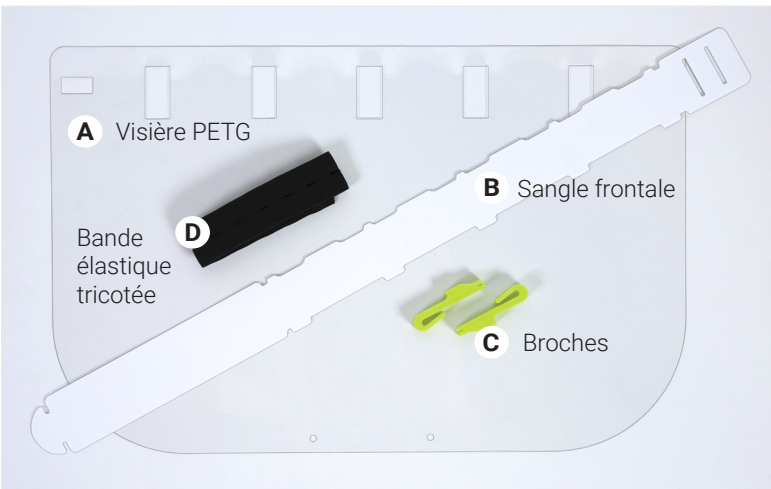

Étape 1. Attacher la sangle frontale à la visière

- i. Tenez la sangle frontale sous la visière dans le sens indiqué sur l'image. Alignez les cinq languettes rectangulaires de la sangle sur les cinq découpes de la visière.
- ii. En partant du centre des cinq découpes, faites glisser la languette rectangulaire dans la découpe.
- iii. Placez votre pouce sur la découpe et votre index sous la languette trapézoïdale. Dans un mouvement de pincement, pliez la sangle jusqu'à ce que la languette trapézoïdale s'enclenche en place.
- iv. Répétez l'opération pour les quatre autres découpes.
- v. Connectez les deux extrémités de la sangle pour former une boucle. Assurez-vous que les extrémités se retrouvent à l'intérieur de la boucle. Accrochez la fente extérieure pour un ajustement plus lâche et la fente intérieure pour un ajustement plus serré.

Étape 2. Attacher les broches

- i. À partir de l'intérieur de la visière, faites glisser un clip dans l'encoche du coin supérieur droit de la visière jusqu'à ce que la pointe du clip s'agrippe à la visière.
- ii. Insérez l'onglet central du clip dans la visière.
- iii. Répétez les étapes ci-dessus pour l'encoche du coin gauche.

Étape 3. Attacher la bande élastique tricotée

- i. Attachez l'élastique tricoté sur les crochets des deux côtés. Il est plus facile de tenir la bande élastique perpendiculairement aux broches, comme illustré dans l'image ci-contre.
- ii. Ajustez la bande élastique pour un maintien bien adapté et confortable.

Réutilisation de l'écran facial

Veillez visiter tinkerine.com/shield-cleaning-instructions.

Traduit par Sabine Decamp, Facilitatrice de Technologie au Conseil Scolaire 40, New Westminster.

AVERTISSEMENT: Cet écran facial n'est pas homologué pour la résistance aux chocs et la protection au feu. Cet écran facial aide à la protection contre certaines projections de fluides, une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou même la mort.

L'écran facial Tinkerine Lite n'est pas stérile. Comme les conditions, méthodes de montage et utilisations de l'écran facial Tinkerine Lite sont hors de contrôle du fabricant, le fabricant rejette expressément toute les responsabilités résultantes du montage et de l'utilisation de l'écran facial Tinkerine Lite. AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE UTILISABLE À TOUTE FIN PARTICULIÈRE, AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE NI AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE CONCERNANT L'ÉCRAN FACIAL TINKERINE LITE. L'utilisateur devrait tester minutieusement toute fonction avant utilisation. L'utilisateur assemble et utilise l'écran facial Tinkerine Lite à ses propres risques et renonce à toute demande de réparation à l'encontre du fabricant. L'utilisateur libère le fabricant de toutes responsabilités, qu'elles soient dues à des risques prévisibles ou non, en relation avec l'écran facial Tinkerine Lite. L'utilisateur est seul responsable de son montage et utilisation de l'écran facial Tinkerine Lite. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs ou omissions concernant l'écran facial Tinkerine Lite. Le fabricant ne fournit aucun conseil médical.