

Cleaning Tinkerine Face Shield (Pro)

Step 1. Precautions for cleaning

- Before you begin, protect yourself by wearing gloves, a face mask, and another face shield if possible.
- Clean and disinfect the working surface thoroughly.
- Only clean one face shield at a time to avoid cross-contamination.

Step 2. Disassembling the face shield

- Disassemble the face shield in the reverse order of the assembly:
 - i. Remove the lower bracket
 - ii. Remove the forehead cushion
 - iii. Remove the knit elastic band
 - iv. Remove the clips
- The foam cushion, knit elastic band, lower bracket, and clips are reusable up to 10 times for non-medical use.

Step 3. Cleaning the PETG visor


- It is recommended to fully submerge the PETG visor in a disinfectant solution to ensure complete sanitization before and after every use.
- After removing the visor from the solution, allow a few minutes for the visor to dry. Wipe down any remaining disinfectant droplets with a clean paper towel.
- If submerging is impossible, thoroughly spraying the visor with a disinfectant can also be effective. Allow a few minutes to dry. Wipe down any remaining droplets.
- Our recommended disinfectants are:
 - Isopropyl alcohol (70%)
 - Hydrogen peroxide (0.5% - 25%)
- To find out more about specific cleaning products, please refer to the [list of disinfectants approved by Health Canada](#).

Step 4. Reapply anti-fog coating

Reapply TruSight Anti-Fog Solution to the inside of the visor.

Step 5. Reassembling the face shield

To reassemble the face shield, refer to the assembly manual.

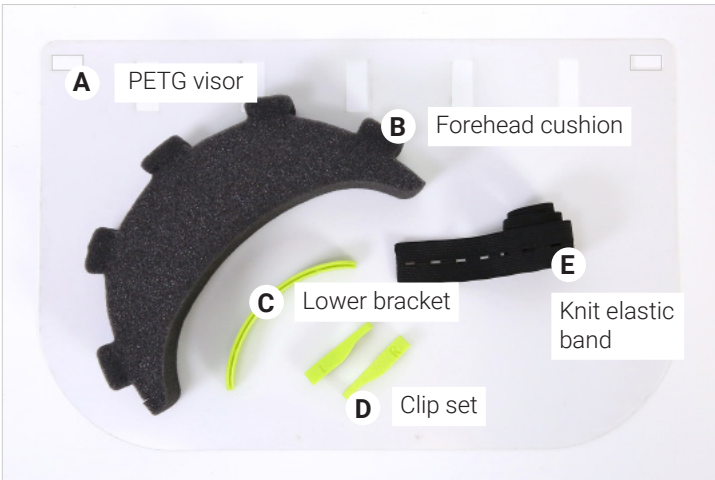

Tinkerine Face Shield is not sterile. Since the conditions and methods of assembly and use of Tinkerine Face Shield are beyond the manufacturer's control, the manufacturer expressly disclaim any and all liability arising from any assembly and use of Tinkerine Face Shield. NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING TINKERINE FACE SHIELD. The user should thoroughly test any application before use. By assembling and using Tinkerine Face Shield, the user does so at their own risk and waives all claims against the manufacturer. The user releases the manufacturer from all liability, whether due to foreseeable or unforeseeable risks, relating to Tinkerine Face Shield. The user is solely responsible for their assembly and use of the Tinkerine Face Shield. The manufacturer is not responsible for errors or omissions relating to Tinkerine Face Shield. The manufacturer does not provide any medical advice.

Nettoyage de l'écran facial Tinkerine (Pro)

Étape 1. Précautions pour le nettoyage

- Avant de commencer, protégez-vous en portant des gants, un masque facial et un autre écran facial si possible.
- Nettoyez et désinfectez soigneusement la surface de travail.
- Nettoyez un seul écran facial à la fois pour éviter la contamination croisée.

Étape 2. Démontage de l'écran facial

- Démontez le masque facial dans l'ordre inverse de l'assemblage:
 - i. Retirez le support inférieur
 - ii. Retirez la mousse de protection frontale
 - iii. Retirez la bande élastique en tricot
 - iv. Retirez les broches
- Le coussin en mousse, la bande élastique en tricot, le support inférieur et les broches sont réutilisables jusqu'à 10 fois pour un usage non médical.

Étape 3. Nettoyage de la visière PETG


- Il est recommandé de plonger complètement la visière PETG dans une solution désinfectante pour assurer une désinfection complète avant et après chaque utilisation.
- Après avoir retiré la visière de la solution, attendez quelques minutes que la visière sèche. Essuyez les gouttelettes de désinfectant restantes avec une serviette en papier propre.
- Si l'immersion est impossible, une pulvérisation complète de la visière avec un désinfectant peut également être efficace. Laissez sécher quelques minutes. Essuyez toutes les gouttelettes restantes.
- Nos désinfectants recommandés sont:
 - Alcool isopropylique (70%)
 - Peroxyde d'hydrogène (0.5% - 25%)
- Pour en savoir plus sur les produits de nettoyage spécifiques, veuillez consulter la [liste des désinfectants approuvés par Santé Canada](#).

Étape 4. Appliquez à nouveau la couche anti-buée

Appliquez à nouveau la solution anti-buée TruSight à l'intérieur de la visière.

Étape 5. Remontage de l'écran facial

Pour remonter l'écran facial, reportez-vous au manuel de montage.

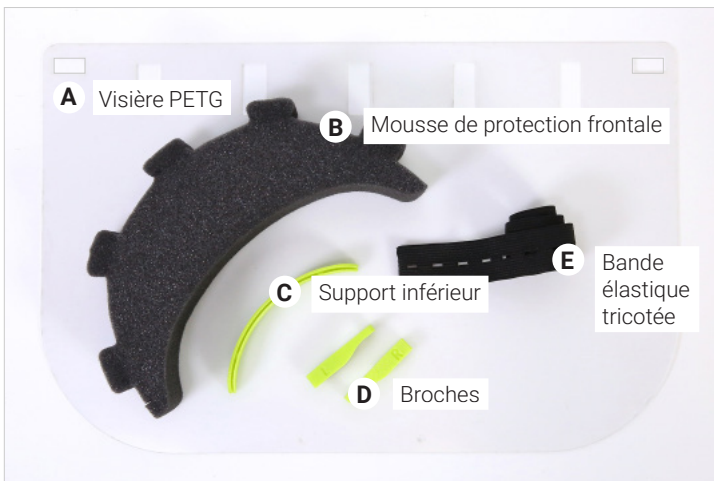

L'écran facial Tinkerine n'est pas stérile. Comme les conditions, méthodes de montage et utilisations de l'écran facial Tinkerine sont hors de contrôle du fabricant, le fabricant rejette expressément toute les responsabilités résultantes du montage et de l'utilisation de l'écran facial Tinkerine. AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE UTILISABLE À TOUTE FIN PARTICULIÈRE, AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE NI AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE CONCERNANT L'ÉCRAN FACIAL TINKERINE. L'utilisateur devrait tester minutieusement toute fonction avant utilisation. L'utilisateur assemble et utilise l'écran facial Tinkerine à ses propres risques et renonce à toute demande de réparation à l'encontre du fabricant. L'utilisateur libère le fabricant de toutes responsabilités, qu'elles soient dues à des risques prévisibles ou non, en relation avec l'écran facial Tinkerine. L'utilisateur est seul responsable de son montage et utilisation de l'écran facial Tinkerine. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs ou omissions concernant l'écran facial Tinkerine. Le fabricant ne fournit aucun conseil médical.